


Cabeça de intubação de via aérea difícil com brônquios - AIRSIM

Nº DE PRODUTO: 3837

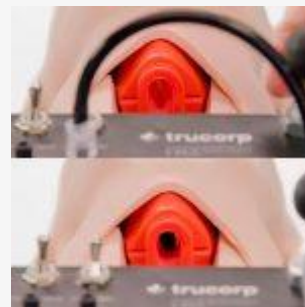

DESCRIÇÃO:

O treinador de cabeças de intubação para adultos oferece uma solução para vários graus de dificuldade quando se pratica o controlo das vias aéreas. Este modelo versátil varia de difícil a muito difícil de entubar, facilitando uma variedade de cenários de treino, desde utilizadores principiantes a avançados.

O AirSim Difficult Airway with Bronchi foi concebido para melhorar a gestão da intubação difícil não planeada, de acordo com as directrizes da Difficult Airway Society.

Ideal para médicos de emergência e de anestesia que precisam de manter a competência em técnicas de emergência de vias aéreas ante-pescoço.

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>

HABILIDADES:

- Traqueotomia percutânea
- Cricotiroidotomia com agulha
- Cricotiroidotomia cirúrgica
- Técnicas de broncoscopia
- controlo das vias aéreas
- FONA dipositivos
- Técnicas de broncoscopia

CASOS E PATOLOGIAS:

VIA AÉREA

- A via aérea interna apresenta uma língua aumentada, cartilagens posteriores inchadas e uma epiglote alongada, o que representa um desafio para o utilizador na gestão da via aérea.

LARINGOSPASMO

- Ajustável de normal a obstrução completa da via aérea.
- O fecho súbito das cordas vocais pode ser simulado.
- Se o utilizador agir corretamente, o laringoespasma pode ser revertido mecanicamente para dar uma resposta positiva.

LARINGE DESLOCADA

- Capacidade de deslocar a laringe para uma posição mais anterior para tornar as cordas vocais mais difíceis de ver.
- Ajustável para proporcionar vários níveis de dificuldade.

EDEMA LINGUAL

- A língua pode inchar para simular vários graus de angioedema lingual.

MANDÍBULA PROTRUÍDA/RETRAÍDA

- Vários graus de má oclusão, uma variante mandibular e duas variantes maxilares.
- Simulação de características de sobremordida e submordida.

TRISMO

- Capacidade de restringir grosseiramente a abertura da boca para dificultar a inserção de dispositivos das vias respiratórias.

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>

BLOQUEIO DO PESCOÇO/RESTRIÇÃO DA ROTAÇÃO DA CABEÇA

- Capacidade de simular artropatia cervical através da restrição da amplitude de movimentos da coluna cervical.
- Bloqueio do pescoço / Restrição da rotação da cabeça

SIMULA A CRICOTIROIDOTOMIA E A TRAQUEOSTOMIA PERCUTÂNEA COM AGULHA E CIRÚRGICA

- Fácil identificação do entalhe esternal, dos anéis traqueais, das cartilagens cricoide e laríngea
- A laringe intercambiável permite a repetição rápida e fácil da utilização
- A pele do pescoço envolvente substituível roda para 10-15 incisões

TÉCNICAS DE BRONCOSCOPIA

- Broncoscopia de diagnóstico
- Técnicas de aspiração pulmonar
- Técnicas de isolamento pulmonar utilizando tubos endobrônquicos esquerdo e direito e bloqueadores brônquicos

CARACTERÍSTICAS:

GERAL

- A via aérea AirSim está certificada para efetuar mais de 20.000 ciclos de intubação sem falhas e tem uma garantia de 5 anos para a via aérea.
- Bolbo de língua insuflável para criar edema da língua e proporcionar uma variação durante o treino.
- Feedback do utilizador através da visualização da insuflação do estômago e da expansão pulmonar
- O design modular permite que todas as peças sejam substituídas na sua organização (se necessário)
- Fornecido pronto a utilizar numa mala de transporte duradoura para facilitar o transporte e a arrumação segura

RECOMENDAÇÕES

- 7,0-7,5 mm de diâmetro interno para intubação nasal
- 8,0-9,0 mm ID para intubação oral
- Tamanhos 3-5 para máscaras laríngeas LMA LMA
- Tamanhos semelhantes para outros dispositivos supraglóticos
- Tamanho 35F-37F para tubos endobrônquicos

INCLUI:

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>



More Than Simulators™
Excellence. Every patient. Every time.

- 1 Cabeça de intubação de vias aéreas difíceis com brônquios – AIRSIM (montada e pronta a utilizar)
- 1 Saco de transporte
- 1 Máscara de ventilação
- 1 PEN USB com o manual do utilizador do produto
- 1 frasco de lubrificação trucorp (100 ml)



MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>