




BLOOD PRESSURE READING SKILLS OMNI1

Nº DE PRODUTO: 1174

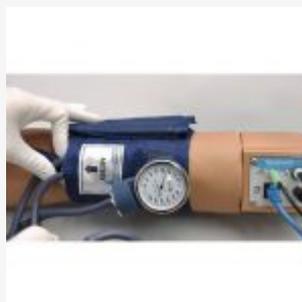

DESCRIÇÃO:

O Blood Pressure Training System inclui um braço esquerdo adulto de tamanho normal que também pode ser ligado a qualquer manequim Gaumard® adulto. Esta é uma ferramenta de formação versátil desenvolvida para ajudar os profissionais de saúde a ensinar os processos e as competências necessárias para realizar procedimentos e técnicas de auscultação da tensão arterial.

HABILIDADES:

- Palpação
- Colocação da braçadeira
- Desinsuflação da braçadeira
- Pressurização manual
- Auscultação dos sons de Korotkoff
- Detecção de hiato do som de Korotkoff
- Palpação dos pulsos radiais
- Leitura da tensão arterial

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>

- Comunicação profissional com o doente

CARACTERÍSTICAS:

GERAL:

- Braço esquerdo de tamanho normal que também pode ser ligado ao manequim Gaumard®.
- Pulso radial programável e palpável quando a pressão da braçadeira é inferior à pressão arterial sistólica selecionada
- Sons de Korotkoff K1 a K4 (K5 é silêncio) audíveis entre as pressões sistólica e diastólica
- Os sons de Korotkoff são automaticamente silenciados se for selecionado o intervalo de auscultação
- Sons de Korotkoff ajustados automaticamente em função da frequência cardíaca selecionada e da velocidade de esvaziamento da braçadeira
- Estetoscópio convencional para auscultar os sons de Korotkoff na zona antecubital
- Tutor de auscultação da tensão arterial programável
- Pressões sistólica e diastólica ajustáveis
- Intervalo de auscultação ajustável
- Frequência de pulso ajustável

CONJUNTO DE ALTIFALANTES EXTERNOS OPCIONAIS (vendido em separado):

- Reproduz sons de Korotkoff através de altifalantes com volume controlado enquanto ausculta com o estetoscópio
- Incorporar a aprendizagem em colaboração, reproduzindo os sons de Korotkoff para vários alunos em simultâneo

INCLUI:

- 1 completa braço tamanho adulto
- 1 aneróide
- 1 manguito Adaptado
- 1 OMNI controlador
- 1 macia bolsa de transporte
- 1 Fonte de alimentação AC Adapter (100 – 240V)
- 1 Instruções Manual

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>