


SUPER OB SUSIE Simulador de parto

Nº DE PRODUTO: 1141

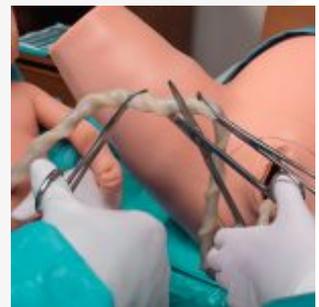

DESCRIÇÃO:

O novo OB SUSIE é um torso de parto realista, concebido para ajudar os educadores a ensinar competências de gestão de parto e trabalho de parto a estudantes de todos os níveis. As estruturas anatomicamente precisas permitem aos estudantes desenvolver competências clínicas transferíveis para uma formação baseada em cenários. O desenho modular permite que a funcionalidade se expanda com crescentes necessidades de formação específicas.

Para estender ainda mais a utilização, estão disponíveis módulos adicionais de hemorragia pós-parto e reparação de episiotomia.

HABILIDADES:

- Executar entregas cefálicas
- Executar a manobra de Ritgen

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>



- Prática de entregas breves (completas, francas e de rodapé)
- Executar a manobra de Pinard
- Simular a distocia do ombro
- Praticar intervenções de emergência: Manobra de McRobert, pressão suprapúbica, varredura posterior de braços e Parafuso de Madeira
- Realização de exercícios placentários e umbilicais: parto placentário, placenta preventiva parcial, cordão nugal, prolapso do cordão, nó verdadeiro, e muitos outros
- Prática de procedimentos de cordas umbilicais como aperto e corte
- Demonstrar rotação interna, expulsão, e rotação externa
- Efectuar entregas operativas com instrumentos reais como aspiração a vácuo e fórceps de entrega assistida
- Simular sucção nasal e oral
- Administração de supositórios rectos.

CARACTERÍSTICAS:

PELVIS SUPER OB SUSIE:

- Tamanho adulto do tronco inferior do diafragma ao quadríceps.
- Pele macia com articulações sem costuras para o realismo.
- Marcos pélvicos anatomicamente precisos, incluindo espinhas isquiáticas e osso da cauda
- Suporta treino de bancada ou simulação híbrida
- Manga abdominal removível para mulheres grávidas
- A articulação da anca ajuda na execução da manobra de McRobert.
- Cérvix removível e canal de parto
- Placenta realista com cotilédones removíveis
- Praticar exercícios de cateterização com uretra patente
- Reservatório de urina suporta até 400ml de urina
- Rectum de patentes aceita supositórios

TERMO INFANTIL:

- O termo recém-nascido tem pontos de referência palpáveis, membros articulados e pele macia por todo o corpo.
- Juntas articuladas sem costuras
- Cavidades nasais e orais.
- Fontanelas e suturas palpáveis.
- Couro cabeludo liso e sem costura
- Articulação realista do pescoço e tronco
- Cordão umbilical removível e cotos de cordão para cortes e grampos adicionais.

INCLUI:

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>

- 1 Super OB Susie Parto torso treinamento
- 1 Abdômen grávido
- 1 neonato a termo
- 1 Parto alça
- 1 Placenta com cotilédones
- 2 cordão umbilical
- 2 Umbilical coto
- 2 Cervix
- 2 canal de nascimento
- 1 Talco
- 1 Óleo mineral
- 1 kit de preenchimento urinário
- 1 Instruções Manual

MODULOS ADICIONAIS:

KIT DE HEMORRAGEM PÓS-PARTUM (vendido separadamente):

- O pacote de gestão PPH permite a formação de competências pós-parto e gestão de emergência.
- Inclui: PPH perineum, útero borrado, colo do útero e concentrado de sangue.

EPISIOTOMIA E KIT DE SUTURO PÓS-PARTUM (vendido separadamente):

- Os treinadores de reparação de episiotomia simulam tecido humano e apoiam a utilização de suturas e instrumentos reais.
- Inclui: Episiotomia Mediolateral Esquerda com Períneo e Episiotomia da Linha Média com Períneo.

MECANISMO DE ASSISTÊNCIA AO NASCIMENTO (vendido separadamente):

- A alavanca manual do mecanismo de ajuda à entrega torna a descida e a rotação do controlo sem esforço.
- Inclui: Mecanismo de entrega, painel traseiro e fixações fixas.

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>