


# Simulador para acceso venoso con ecografía - TRUIV BLOCK

Nº DE PRODUCTO: 2545

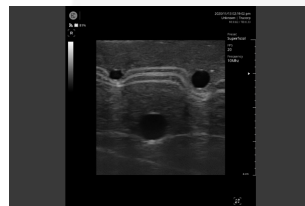

## DESCRIPCION:

Como parte de la gama de productos TruUltra, **TruIV Block** permite a los alumnos adquirir y mejorar sus **habilidades asociadas con la canulación intravenosa y el manejo de la sonda ecográfica**.

**Con 8 venas (superficiales y profundas) que varían de 4 a 8 mm de diámetro.** Los usuarios pueden practicar el uso del ecógrafo durante los procedimientos intravenosos. Gracias a su anatomía cuidada que incorpora capas de fascia, las imágenes ecográficas favorecen el aprendizaje, desde el inicio a situaciones más complejas.

Incluye una cómoda bolsa de transporte, un soporte antideslizante y el kit para limpieza y llenado del reservorio.

## HABILIDADES:

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>



- Canulación intravenosa guiada por ecografía
- Posicionamiento y movimiento de la sonda en tejidos blandos sensibles
- Reconocimiento de las venas en los tejidos blandos sensibles
- Extracción de sangre para proporcionar una respuesta positiva de la canulación exitosa

## CARACTERÍSTICAS:

### GENERAL:

- Características realistas: presenta 8 venas (4 superficiales y 4 profundas) más capas de fascia para un realismo mejorado.
- Entrenamiento realista: apunte a varias venas de 4 mm a 8 mm de diámetro. Las imágenes por ecografía son increíblemente realistas
- Comentarios positivos de los usuarios: confirme los procedimientos de canulación intravenosa satisfactorios extrayendo sangre
- Fácil de configurar: listo para comenzar a entrenar en menos de 5 minutos
- Duradero: los materiales TruUltra únicos y autoregeneradores disminuyen la apariencia de las huellas de las agujas para facilitar un gran volumen de práctica repetida. El inserto facilitará aprox. 4000 penetraciones de aguja antes de que se requiera un inserto de reemplazo
- Intercambiable: el inserto de repuesto es rentable y fácil de reemplazar sin interrumpir el tiempo de enseñanza
- Fácilmente transportable: se entrega en una funda protectora compacta, perfecta para entrenar en diferentes ubicaciones
- Versátil: opciones de visualización anatómica longitudinal y transversal. TruIV Block es ideal para medicina de emergencia, radiología, programas de capacitación quirúrgica, programas de capacitación en ecografía, centros de simulación, instalaciones de educación médica y fabricantes de ecógrafos para demostraciones y educación sobre ecografía.
- Universal: Compatible con todas las marcas de equipos de ecografía.

## INCLUYE:

- 1 Simulador TruIV Block
- 1 Bolsa de transporte TruIV Block
- 1 Jeringa de 60 ml
- 2 Tubos para la inserción / extracción de fluidos

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>