


SIMULADOR PARA INYECCIONES FACIALES MODELO C ADULTO

Nº DE PRODUCTO: 3181

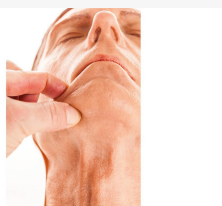

DESCRIPCION:

Nuestro simulador para inyecciones faciales está hecho de una prótesis de silicona endurecida con platino de alta calidad con una sensación táctil realista. Luego, las pieles se montan en un cráneo de espuma rígida que tiene varios puntos de referencia para ayudar en el proceso de enseñanza.

Estos cráneos están unidos a 2 soportes flexibles que permiten inclinar la cabeza en posiciones adecuadas. Luego, cada cabeza se pinta a mano, se une a un respaldo de plástico y se monta sobre una base de alta calidad.

HABILIDADES:

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>

- Inyección de Botox (toxina botulínica)
- Técnicas de relleno superficial

CARACTERÍSTICAS:

GENERAL:

- Fabricado con silicona de alta calidad ultrarrealista
- Esculpido y moldeado por expertos
- Pintado a mano hasta el más mínimo detalle

INSTRUCCIONES DE USO:

- Permite la inyección de fluidos: Tras la administración, secar la zona tratada con un pañuelo y/o papel. Pellizcar la zona para extraer el fluido del interior por el mismo orificio donde se realizó la inyección
- Verificar que el fluido ha sido extraído totalmente para evitar deformaciones en el aspecto del simulador

INCLUYE:

- 1 Modelo de inyecciones faciales
- 1 Soporte

MODULOS ADICIONALES:

MODELOS DISPONIBLES:

- Modelo A (Ref. 3182): mujer joven de piel clara
- Modelo B (Ref. 3179): Mujer de edad avanzada con piel clara
- Modelo C (Ref. 3181): Mujer de mediana edad con piel oscura
- Modelo D (Ref. 3178): Hombre de edad avanzada con piel clara
- Modelo E (Ref. 3177): Mujer joven de piel clara
- Modelo F (Ref. 3183): Mujer de mediana edad con piel media
- Modelo G (Ref. 3175): Mujer de mediana edad con piel clara

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>