
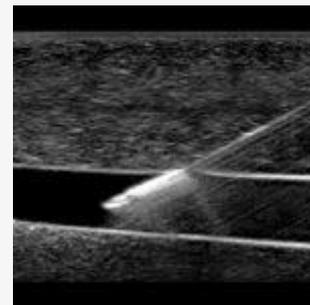
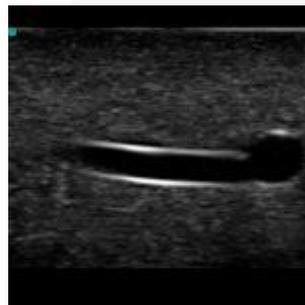


Fantoma para acceso venoso ecoguiado pediátrico - 5 venas

Nº DE PRODUCTO: 4316

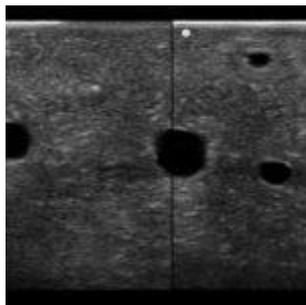

DESCRIPCION:

Este fantoma está diseñado para el entrenamiento en punción vascular bajo guía ecográfica. Presenta 5 vasos simulados de paciente pediátrico con ramificaciones, proporcionando entrenamiento en coordinación mano-ojo, reconocimiento de imágenes ecográficas, posicionamiento de la punción, técnicas de punción intraplanar y extraplanar, y otras habilidades fundamentales requeridas en procedimientos vasculares clínicos.

HABILIDADES:

- Coordinación mano-ojo
- Reconocimiento de imágenes ecográficas

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>



- Posicionamiento de la punción
- Técnicas de punción intraplanar y extraplanar
- Acceso venoso guiado por ecografía

CARACTERÍSTICAS:

GENERAL:

- Apariencia y Propiedades Acústicas:

- El modelo tiene una apariencia de color piel y su material imita las propiedades acústicas del tejido humano. Puede mostrar imágenes ecográficas vasculares realistas en cualquier dispositivo de ultrasonido, facilitando el entrenamiento en la medición del diámetro vascular.

- Simulación Vascular:

- El modelo incluye 5 vasos simulados con una bifurcación
- El tronco principal tiene un diámetro de 6 mm, con diámetros de las ramas de 4 mm y 2 mm respectivamente.
- Estos vasos contienen un fluido azul simulado para replicar los vasos sanguíneos venosos.

- Simulación de Escenarios Clínicos:

- Al ajustar la profundidad de los vasos simulados, el modelo replica escenarios clínicos realistas para la punción vascular bajo guía ecográfica.
- Permite un entrenamiento completo en el monitoreo del proceso de punción con ecografía, observación de la posición de la punta de la aguja y posicionamiento espacial para el entrenamiento en punción y biopsia.

- Sensación Realista de Punción:

- El modelo proporciona una sensación realista durante la punción. Las punciones exitosas resultan en un retorno visible de sangre.
- Además, la inyección de una pequeña cantidad de fluido permite confirmar la posición de la punta de la aguja, con el fluido capaz de autoextrusión.

- Currículo de Entrenamiento Avanzado:

- Utilizando factores como el grosor del vaso y la posición relativa, el modelo apoya el desarrollo de un currículo de entrenamiento progresivo para la punción vascular guiada por ultrasonido.
- Este currículo puede estructurarse desde niveles básicos hasta avanzados, asegurando un desarrollo completo de habilidades.

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>



More Than Simulators™
Excellence. Every patient. Every time.

INCLUYE:

- Fantoma para acceso vascular con ecografía
- Bolsa de transporte

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>