


Simulador para diagnóstico de patologías de tiroides y biopsia con ecografía

Nº DE PRODUCTO: 4285

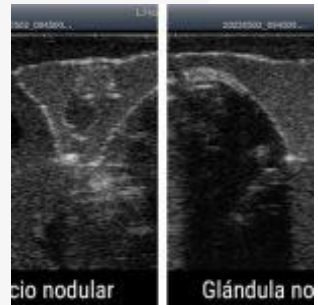

DESCRIPCION:

Este simulador para diagnóstico de patologías de tiroides tiene un torso masculino real que incluye cabeza, cuello, hombros y parte superior del tórax. Sirve como una excelente herramienta de enseñanza para la identificación de diversos tipos de tiroides normal, adenoma de tiroides, cáncer de tiroides, bocio nodular, quiste tiroideo y la formación en técnicas adecuadas de exploración de tiroides.

HABILIDADES:

- Ecografía tiroidea
- Procedimientos de biopsia guiada por ecografía
- Familiaridad con los puntos de referencia anatómicos internos

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>

- Aspiración con aguja en quiste

CASOS Y PATOLOGIAS:

- Adenoma tiroideo con borde bien definido y halo liso uniforme
- Cáncer de tiroides con masa irregular, borde poco definido, eco interno irregular o ecos fuertes de calcificación
- Bocio nodular con borde irregular y tamaños variables de nódulos con eco bajo, isoecoico o eco alto
- Quiste tiroideo, lleno de líquido, zona oscura y sin eco

CARACTERISTICAS:

GENERAL:

- Colocación y fijación en múltiples posiciones (0°, 30°, 90°), lo que facilita el entrenamiento en diferentes ángulos.
- Materiales ultrasónicos realistas en el cuello y varios tipos de máquinas ultrasónicas reales en clínica disponibles, desarrollando imágenes realistas como la arteria carótida común, la vena yugular interna, la tráquea, el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, los lóbulos de la glándula tiroides y el istmo.
- Incluye cuatro módulos de tiroides y puede mostrar cinco condiciones: Tiroides normal con eco parenquimatoso homogéneo y cápsula bien definida.
- La piel del módulo admite la desinfección con yodo.
- Duradero para un uso repetido y fácil sustitución de las piezas consumibles.

INCLUYE:

- Simulador de tiroides
- Módulo de tiroides normal
- Modulo con adenoma y bocio nodular
- Modulo con adenoma cáncer
- Modulo con bocio nodular y quiste
- Manual de usuario

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>